


● N° de modèle H3002

TESTEUR POUR LA DÉTERMINATION DE LA DENSITÉ

ISO 1183

ASTM D 792

Ce testeur permet de déterminer la densité des plastiques par portance. Le set complet se compose d'un b cher, d'un thermom tre, d'un corps plongeant en verre pour d terminer la densit  du liquide, d'un crible et d'un corps d'immersion.

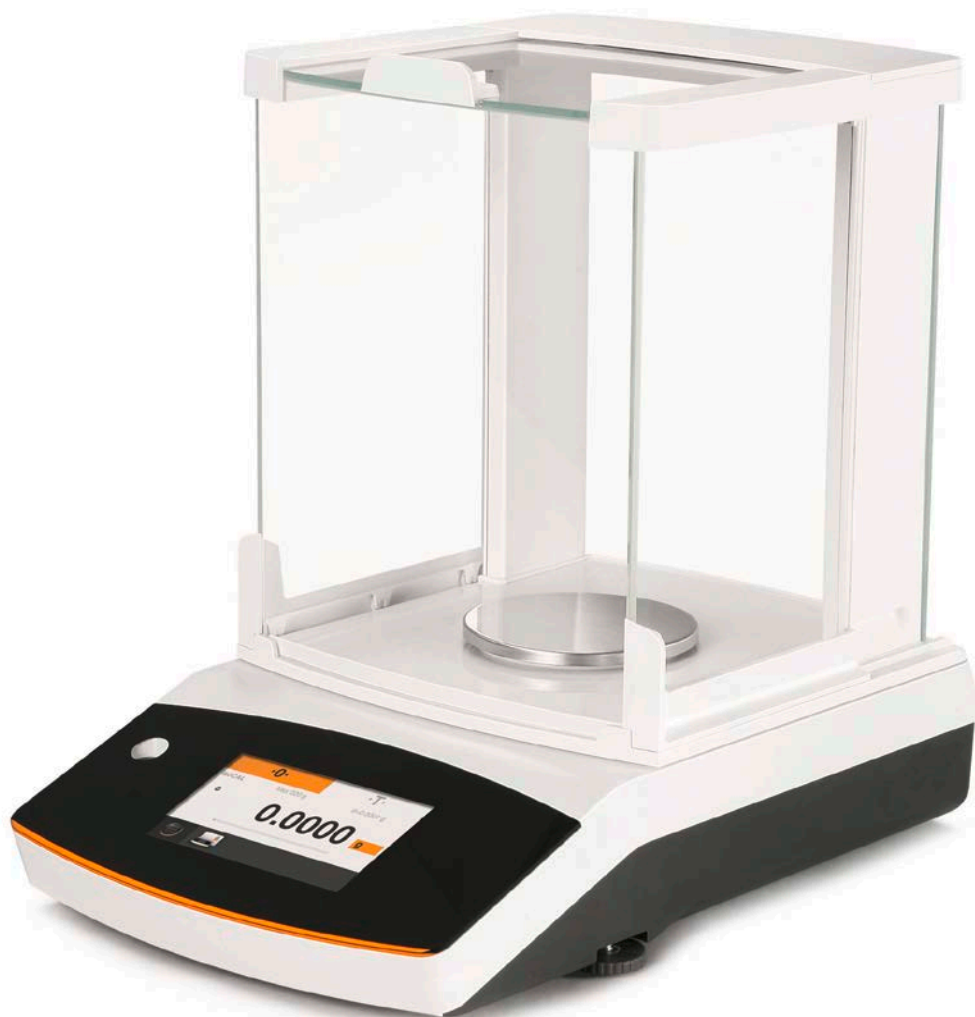

Caractéristiques standard

- | | |
|--|--|
| ● Commande aisée et visualisation claire via l'écran tactile intégré | ● Poids d'ajustage interne entraîné par moteur |
| ● Fonction d'ajustage et d'étalonnage isoCAL | ● Application intégrée de détermination de la densité |
| ● Kit de détermination de la densité | ● Conditions de pesée constantes grâce au pare-vent entièrement en verre |
| ● Fonction d'ajustage / d'étalonnage automatique | ● Conformité CE |



Modèle TESTEUR POUR LA DÉTERMINATION DE LA DENSITÉ		H3002-0010
Plage de pesage	g	220
Lisibilité	mg	0,1
Reproductibilité	mg	≤ 0,1
Erreur de linéarité	mg	≤ 0,2
Temps de stabilisation type	s	1,5
Diamètre du plateau de pesage	mm	90
Hauteur de la chambre de pesage	mm	209
Poids	kg	6,4
Largeur x profondeur x hauteur (boîtier)	mm	218 x 360 x 320
Pare-vent pour balance de précision		Pare-vent avec portes coulissantes faciles à ouvrir pour un pesage sans effort ; chambre de pesée dotée d'une protection anti-éclaboussures facile à nettoyer toutes les vitres peuvent être nettoyées ou remplacées séparément
Boîtier		Revêtement résistant aux produits chimiques pour un nettoyage simplifié
Cellule de pesage		montée sur une plaque de base massive en alliage d'aluminium spécial, conçue pour des sollicitations maximales résultats de pesage stables et reproductibles et sensibilité minimale à la température garantis
Étalonnage		isoCAL - calibrage interne automatique, selon des critères de température et de temps
Supervisor Lock		Verrouillage des menus pour la protection contre toute manipulation involontaire
Cache de protection pour l'exploitation		propose une protection supplémentaire contre la saleté et les rayures, fourni avec la balance
Pesage sous la balance		intégré
Affichage		Écran tactile
Interface de données en série		mini USB Transmission directe des données vers les programmes Microsoft® sans logiciel supplémentaire ; intervalle d'édition des données programmable Protocoles de transfert des données : SBI, xBPI, tableur, texte
Applications		applications de laboratoire spécifiques telles que Mélange, Composants, Statistiques et Conversion ; autres applications standard telles que Pesage, Densité, Pesage en pourcentage, Contrôle, Valeur max., Comptage et Pesage dynamique
Température ambiante admissible	°C	+10 à +30
Humidité relative admissible	%	max. 70 sans condensation
Indications de tension		100-240 V, -15%/ +10%, 50- 60Hz, 0,2A